



%100 EO Ampül

Liner Bag 95-130 cm

Sterilizasyon Ampül Seti



Liner Bag Gereksinimsiz 79-57-42 cm

Otomatik Kartuş Aktivatörlü Yükleme Sepeti



%100 EO Kartuş



ENDÜSTRİYEL TİP ETİLEN OKSİT STERİLİZATÖRLERİ



Sterilizasyon Sarfları



EO Monitör&Alarmı



Kazan tip endüstriyel sterilizatörler için arayınız.



AX 1000 / 1000 Lt.



KORDON TIP SAĞLIK ARAÇ GEREÇLERİ MÜH. PROJE LTD. ŞTİ.

ADRES:
10006/1 Sokak No: 43 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Tel. +90 (232) 348 60 60 (pbx)
Fax. +90 (232) 348 60 90
Web: <http://www.axis.com.tr>
<http://www.kordontip.com>
e-mail: info@kordontip.com


Yetkili Bayi



- Hızlı Sterilizasyon
 - Pratik, kullanımı kolay
 - Sağlam yapı, arıza risksiz çalışma
 - Güvenli



AX 2000 / 2000 Lt.

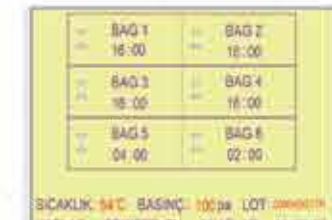

7" renkli dokunmatik monitöründen komutlar girilebilmekte, uyan mesajları görülebilmekte ve çalışma modları takip edilebilmektedir.



Sterilizasyon ile ilgili tarih, zaman, işlem, dokümantasyon, vb. bilgiler cihaz üzerinde bulunan tümleşik mini yazıcıdan çıktı olarak alınabilmektedir.

- Yüksek Teknoloji
- Hızlı Sterilizasyon (4 saat)
- %100 EO
- %100 Güvenli
- Çalışma Boyunca Kabinin Vakum Altında Tutulması
- Negatif Kabin Basıncını Doğrudan İzleyebilme ve Kayıt
- Çıkış borusu ve baca tıkanıklık uyarı sistemi
- Mikrobilgisayar kontrol
- Pratik, kolay kullanım
- Modüler, operasyon esnasında yeni liner bag eklenebilme
- Her liner bağı ayrı ayrı çalıştırabilme
- Düşük gaz tüketimi
- Sağlam yapı, arıza risksiz çalışma
- Paslanmaz Çelik Kabin
- Dekoratif Inox Dış Yüzey
- Üstün vakum pompa sistemi
- Kolay montaj , alt yapı gereksinimsiz
- Kolay taşınma, portatif
- EN 11135 standardında validasyon imkânı
- Opsiyonel çift yönlü dizayn
- Taban ısıtma sistemi
- Kolay parça değiştirilebilme, soketli yapı
- Sızdırmaz kapı contası ve pürüzsüz paslanmaz conta baskı kaidesi
- USB 2.0 portu sayesinde kolay erişim, internet üzerinden program güncelleme ve çalışma kontrolü



AX 6000 / 6000 Lt.



AX 4000 / 4000 Lt.

Pratik, endüstriyel tip etilen oksit sterilizatörleridir. Sterilize edilecek malzemeler, pratik olarak sterilizasyon ampülü ve nem çipi ile birlikte Liner Bag içerisine konulur ve ağı kapatılır. Liner bag, sterilizatörün içine yerleştirildikten sonra, sterilizasyon ampülünün başlığına basılarak sterilizasyon başlatılır. Sterilizasyon ve havalandırma çevrimi sonrası, malzemelerin kullanıma hazırdır. Oldukça düşük oranda, 24 gr lık etilen oksit ampülleri ile çalışır. Cihazın, havalandırma dahil 4 saatlik kısa programı vardır. Opsiyonel olarak, otomatik kartuş aktivatörlü ve havalandırıcı, portatif otomatik yükleme sepetleri kullanılabilir. Çalışma esnasında, sterilize edilecek yeni malzemeleri eklemek ve ayrı çalıştırmak mümkündür. Negatif kabin basıncı göstergisi sayesinde, operatör güvenliği tam sağlanır. Net iç kullanım hacmi yüksektir. Montaj ve kullanım, pratik ve kolaydır.

| MODEL | KAPASİTE | İÇ | | | DIŞ | | |
|---------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| | | En | Boy | Derinlik | En | Boy | Derinlik |
| AX 1000 | 1000 LT | 83 cm | 177 cm | 70 cm | 90 cm | 207 cm | 81 cm |
| AX 2000 | 2000 LT | 173 cm | 177 cm | 70 cm | 181 cm | 207 cm | 83 cm |
| AX 4000 | 4000 LT | 173 cm | 177 cm | 136 cm | 181 cm | 207 cm | 149 cm |
| AX 6000 | 6000 LT | 248 cm | 177 cm | 136 cm | 256 cm | 207 cm | 149 cm |
| AX 9000 | 9000 LT | 374 cm | 177 cm | 136 cm | 382 cm | 207 cm | 149 cm |