


# AXIS AXCS-300

OTOMATİK KESME & KAPATMA MAKİNASI  
*medikal sterilizasyon ruloları için*



*medikal zarf ve rulolardaki tıbbi aletlerin  
profesyonel paketlenmesi için*

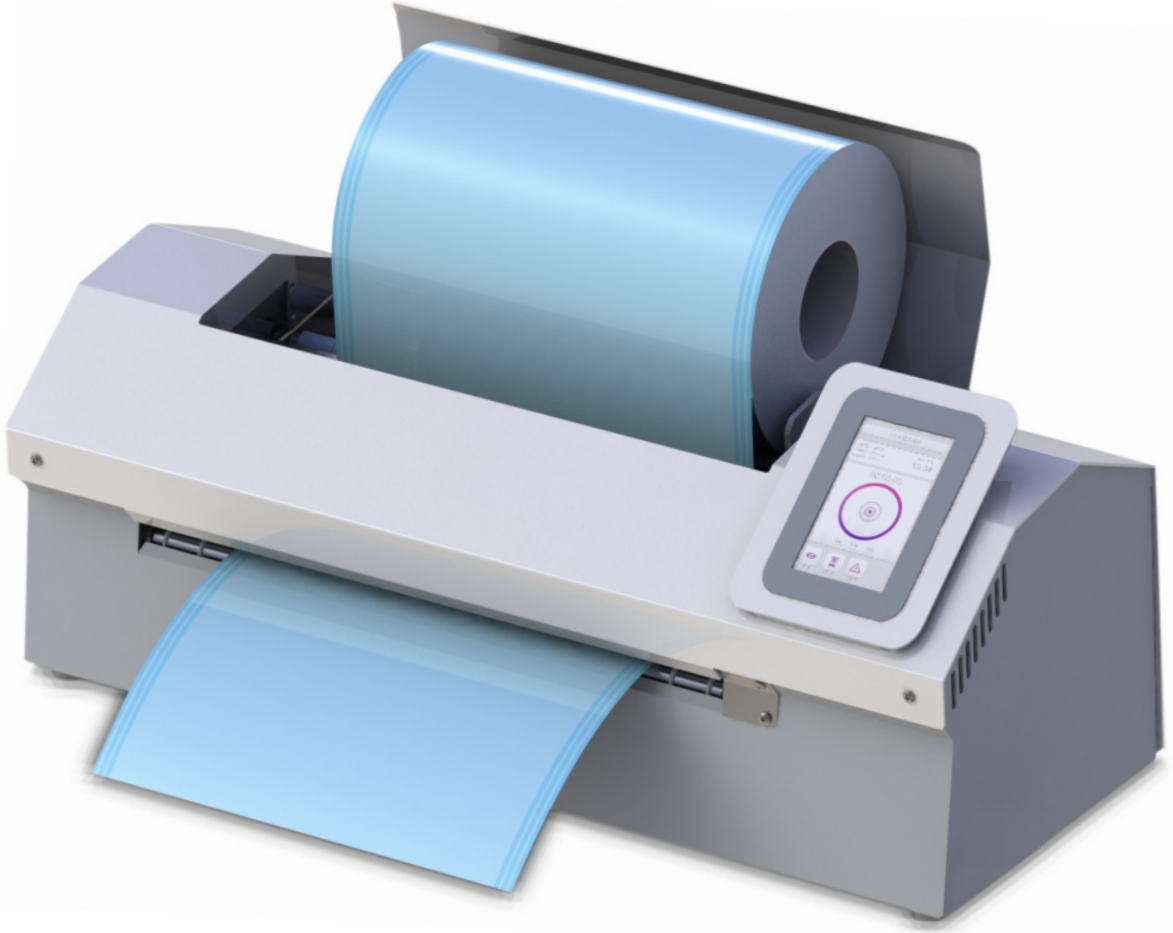

 **KORDON**

Tıp Sağlık Araç ve Gereçleri

Üretici: KORDON TIP SAĞLIK ARAC GEREÇLERİ  
PROJ. MUH. İTH.SAN. VE TIC.LTD.STİ.


10006/1 No:43 A.O.S.B CİGLİ İZMİR TÜRKİYE

www.kordontip.com \* [info@kordontip.com](mailto:info@kordontip.com)

Tel: +90232.348.60.60 \* Fax:+90232.348.60.90

## Teknik Özellikler

Ekran	4.3" renkli LCD dokunmatik ekran
Güç	230 V
Kesme Uzunluğu	> 50 mm
Kesme Hızı	± 0,5 m/dk.
Kapatma Hızı	10 m/dk.
Kapatma Uzunluğu	12 mm
Çalışma Sıcaklığı	60-220°C
Ölçüler	600 x 350 x 320mm
Ağırlık	30 kg (66 lb)
Yazıcı	Mevcut değil

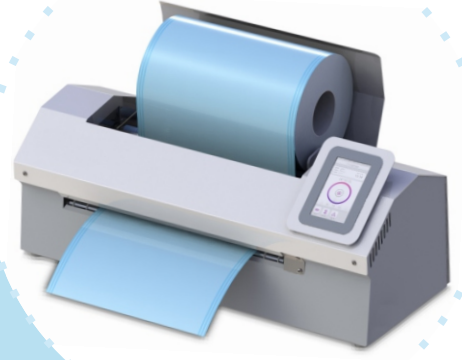

-Axis AXCS-300 Kesme ve Kapama Makineleri, poşet , zarf ve ruloların paketlenmesi için uygundur.

-Makine, basit kullanım ve güvenilir performans sağlayan bir arayüzü ve 4,3 "renkli LCD dokunmatik ekrana sahiptir.


-Axis AXCS-300 Kesme ve Kapama Makinaları, verilen parametrelere göre istenilen boy ve miktarda kağıt poşet, zarf ve ruloları otomatik olarak kesip kapatmaktadır.

-Bu yüksek performanslı makineler, basit ve kolay kullanım özellikleri nedeniyle manuel kesicilere ideal alternatiflerdir.

-Hastanelerin sterilizasyon bölümlerinde çeşitli kağıt-plastik poşet ambalajlarını kesmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

-Kesin sıcaklık kontrolü ve sabit temas basıncı ve sızdırmazlık hızı, tekrarlanabilir sızdırmazlık sonuçlarını garanti eder. Sızdırmazlık sıcaklığı ± 4 ° C toleransın dışında ise cihaz otomatik olarak kapanır.

- Hijyenik kullanım için paslanmaz çelik.
- Mikroişlemci ile sıcaklık kontrolü
- Küresel olarak anlaşılır kodlama.
- Optik sensörlü otomatik besleme
- Sağlam, dayanıklı yapı

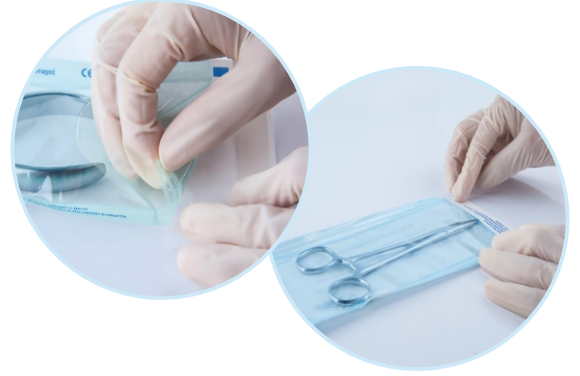

Axis tıbbi sterilizasyon ruloları, tıbbi cihazlar, farmasötik çözümler ve diğer sağlık ürünleri için güvenli ve güvenilir steril bariyer sistemleri sağlar.

Ruloların köşelerinde Buhar ve Etilen Oksit kimyasal indikatörleri bulunmaktadır. Formaldehit (FORM) ve Hidrojen peroksit (Plazma) indikatörü istek üzerine mevcuttur. ISO 11140-1 ve EN 868-5 standartlarına uygundur.

### Kod

### Ölçüler

AXFR50200	50 mm x 200 m
AXFR75200	75 mm x 200 m
AXFR100200	100 mm x 200 m
AXFR150200	150 mm x 200 m
AXFR200200	200 mm x 200 m
AXFR250200	250 mm x 200 m
AXFR300200	300 mm x 200 m
AXFR350200	350 mm x 200 m
AXFR400200	400 mm x 200 m

Sipariş için [info@kordontip.com](mailto:info@kordontip.com) / [satis@kordontip.com](mailto:satis@kordontip.com)

Tel: 0232.348.60.60 \* Fax: 0232.348.60.90

