

YENİ

AXRD - 200

A X I S H I Z L I O T O M A T İ K
O K U Y U C U İ N K Ü B A T Ö R

Buhar, Hidrojen Peroksit, Etilen Oksit ve Formaldehit sterilizasyon prosesleri için ultra hızlı ve güvenilir biyolojik indikatör değerlendirmesi sağlayan tamamen otomatik, yüksek performanslı bir sistemdir.

Buhar (AX225) ve Hidrojen Peroksit (AX94) biyolojik indikatörleri için

⚡ 1 dakikada hızlı okuma sağlar.

Sonuçların anında alınmasına olanak tanır ve bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

Hastaneler, CSSD'ler, laboratuvarlar ve sterilizasyon merkezleri için tasarlanan AXRD-200, maksimum doğruluk ve tam dijital izlenebilirlik sunarken operatör müdahalesini minimuma indirir.




MADE IN TÜRKİYE



AXIS AXRD-200 Özellikleri

Dahili QR Kod (Karekod) Okuyucu

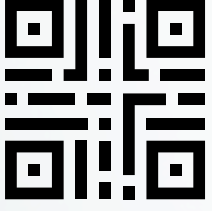

AXRD-200 Hızlı Otomatik Okuyuculu İnkübatör, biyolojik indikatör kapağı üzerindeki QR kodunu otomatik olarak okuyan dahili bir QR kod okuyucuya sahiptir. Qr kod okutulup, biyolojik indikatör bir yuvaya yerleştirildiğinde, dahili QR (karekod) okuyucu otomatik olarak şunları tanımlar:


- Biyolojik indikatör türü
- İnkübasyon süresi
- Lot numarası
- Miadı

Bu özellik, manuel veri giriş hatalarını ortadan kaldırır ve her döngünün hassas şekilde izlenmesini sağlar.



20.000 Sonuç Saklama Kapasitesi

10 adet bağımsız yuvaya sahip olan bu cihaz, 20.000 adede kadar kapsamlı veri saklayabilir. Uzun süreli saklama ile tam izlenebilirlik sağlarken, bunun için harici bir depolama sistemine ihtiyaç duymaz. Uyumluluk ve denetim gereksinimlerini kolayca karşılar.

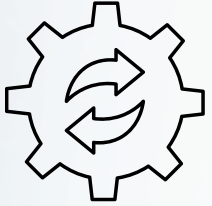

Farklı İndikatörleri Eş Zamanlı Okuma

Buhar, Hidrojen Peroksit, Etilen Oksit (EO) ve Formaldehit biyolojik indikatör inkübasyon programlarını destekler. Farklı okuma sürelerine sahip Buhar ve Hidrojen Peroksit indikatörlerinin 60 °C sabit sıcaklıkta eşzamanlı olarak okunmasını sağlar. Ekran üzerindeki ilerleme çubuklarına dokunarak biyolojik indikatör tipi ve inkübasyon süreleri arasında kolayca seçim yapılabilir. Bu özellik kullanım kolaylığı sağlarken, işlem sürecini de hızlandırır.



Dahili Web Sunucusu ve Bulut Entegrasyonu

Dahili web sunucusu sayesinde, cihaz verilerine, raporlara ve yapılandırma ayarlarına PC, tablet veya yerel ağ üzerinden güvenli erişim mümkündür.

Sonuçlar merkezi bulut sistemlerine aktarılabilir ve şunlar için kullanılabilir:

- Uzaktan izleme
- Veri yedekleme
- Performans analizi



7" Renkli Dokunmatik Ekran Arayüzü

Kullanıcı dostu dokunmatik arayüz, verimli iş akışı ve kolay kullanım için tasarlanmıştır. Geniş ve net ekran sayesinde tüm işlem adımları, sıcaklık bilgisi ve kalan süre kolayca görüntülenebilir. Menü yapısı operatörlerin hızlı ve hatasız işlem yapmasına yardımcı olur.



AXIS AXRD-200 Özellikleri

Bluetooth ile Axis Mobil Uygulaması

Seçili modellerde Bluetooth bağlantısı mevcuttur. Etkinleştirildiğinde, tablet veya telefon üzerinden Axis Mobil Uygulaması ile bağlantı kurarak anlık takip ve operasyonel esneklik sağlar.

Axis Mobil Uygulama ile Raporlama & Kalite Güvencesi

- Otomatik dijital sonuç kaydı
- Dışa aktarılabilir raporlar (PDF formatında)
- Gerçek zamanlı görsel ve sesli alarmlar
- Ağ entegrasyonu ile merkezi izleme

Modern sterilizasyon dokümantasyon standartlarına uygun olarak tasarlanan AXRD-200, regülasyon uyumluluğunu, operasyonel verimliliği ve hasta güvenliğini artırır.



Wi-Fi Bağlantısı

AXRD-200'de standart olarak dahili Wi-Fi bulunur ve hastane veya laboratuvar ağlarına sorunsuz entegrasyon sağlar.



Dahili Termal Yazıcı

AXRD-200 dahili termal yazıcı ile donatılmıştır. Bu sayede harici cihazlara ihtiyaç duymadan inkübasyon sonuçları ve döngü raporları anında basılabilir, hızlı dokümantasyon, kolay denetim hazırlığı ve kesintisiz kayıt tutma sağlanır.



Operatör Tanıma Sistemi

Operatör tanıma desteği ile izlenebilirlik artırılır. Her işlem için kullanıcı kimliği kaydedilerek kalite güvencesi sağlanır.



Uzaktan Yazılım Güncelleme

AXRD-200 uzaktan yazılım güncellemelerini destekler; sistem geliştirmeleri, yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri saha müdahalesi olmadan uygulanabilir. Bu özellik, cihazın en güncel operasyonel ve regülasyon gerekliliklerine uygun kalmasını sağlar ve cihazın hizmet veremediği süreyi minimize eder.




Otomatik Biyolojik İndikatör Kırma Sistemi

Talep üzerine sunulan bu sistem, biyolojik indikatör inkübatöre yerleştirildiğinde otomatik olarak tüpleri kırar. Ekran üzerinde işlemle ilgili "TÜP KIRILIYOR" uyarısı vererek kullanıcıyı bilgilendirir. Manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırır ve tutarlı, güvenilir işlem sağlar.



AXIS AXRD-200 Özellikleri

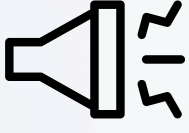

Sesli Bildirimler ve Alarmlar

AXRD-200 Hızlı Otomatik Okuyuculu İnkübatör, sesli bildirimler ve uyarı alarmları ile olayları net ve hızlı şekilde bildirir, operasyonel farkındalığı ve güvenliği artırır.




Renkli İlerleme Çubukları

Biyolojik indikatör türlerine göre atanmış renkli ilerleme çubukları, inkübasyon sırasında kolay durum takibi sağlar. Cihaz ekranı her bir yuvanın gerçek zamanlı sıcaklığını ve kalan inkübasyon süresini ayrı ayrı gösterir



Süresi Dolmuş ve Kullanılmış Ürün Koruması


AXRD-200 Hızlı Otomatik Okuyuculu İnkübatör süresi dolmuş veya daha önce kullanılmış biyolojik indikatörlerle işlem yapılmasını uyarı vererek önler ve işlem ve süreç bütünlüğünü sağlar.

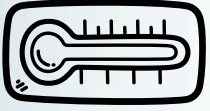

Harici Termometre Yuvası

İnkübatör, bağımsız sıcaklık doğrulaması için özel bir harici termometre yuvasıyla donatılmıştır. Bu sayede cihazın sıcaklığı harici olarak kolayca ölçülüp hassas bir şekilde kalibre edilebilir, güvenilir performans her zaman garanti edilir.

AXRD-200 EKRANLARI

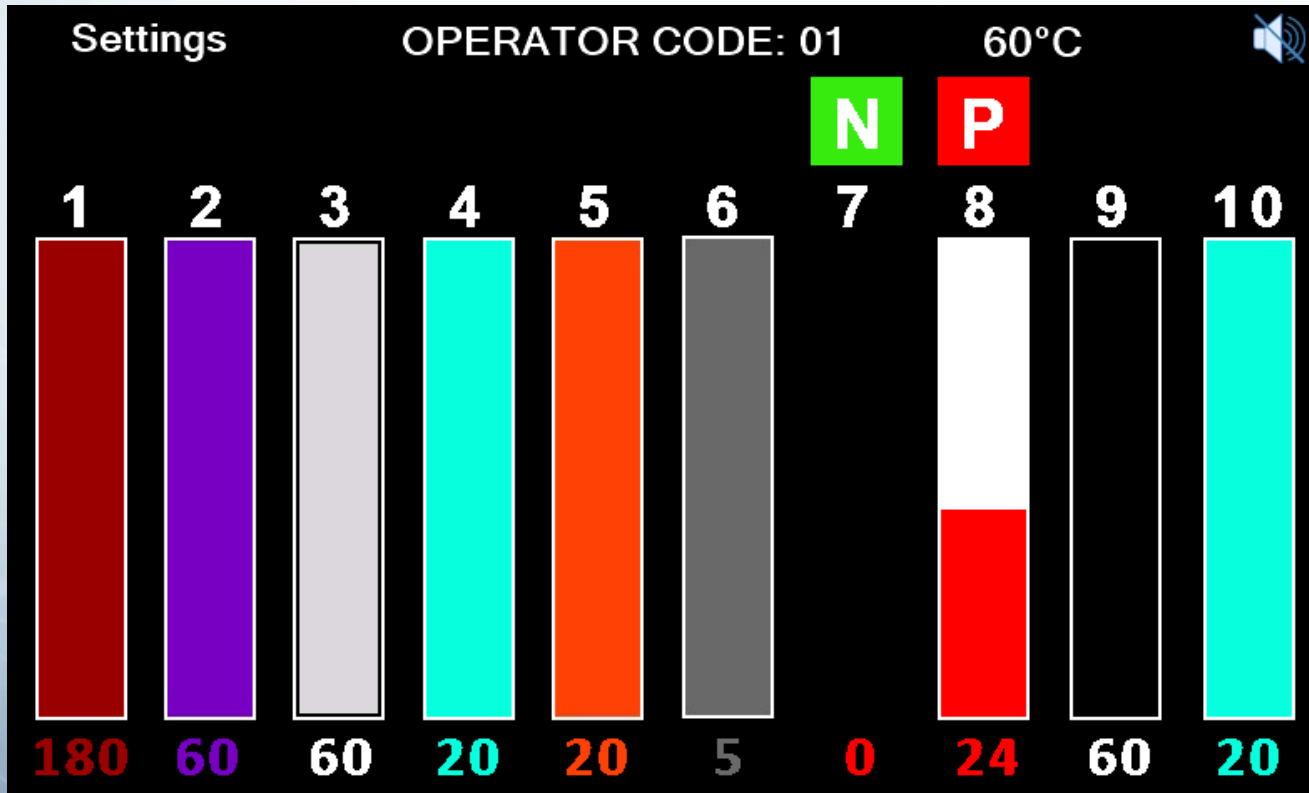

Kayıt No:	1
Tarih:	01/01/2026
Okuma Zamanı:	12:48:50
Tüp No:	3
BI Lot:	OGF052027
BI ID	0001
BI Tipi:	BUHAR 20 dk
Operatör Kod:	01
Operatör:	ZEYNEP
Sterilizatör No:	001
Döngü No:	010
Sonuç:	NEGATIF

Wifi Networks

Axis Hotspot	☐ Manual
Alex's Phone	☐ Automatic
Wispotter	☐ USB
KordonTip_Guest	☒ Wifi
KordonTip_Staff	☐ Bluetooth