


# AXIS OTOMATİK RULO KESME & KAPATMA MAKİNASI

## Sterilizasyon Paketleme Ürünleri

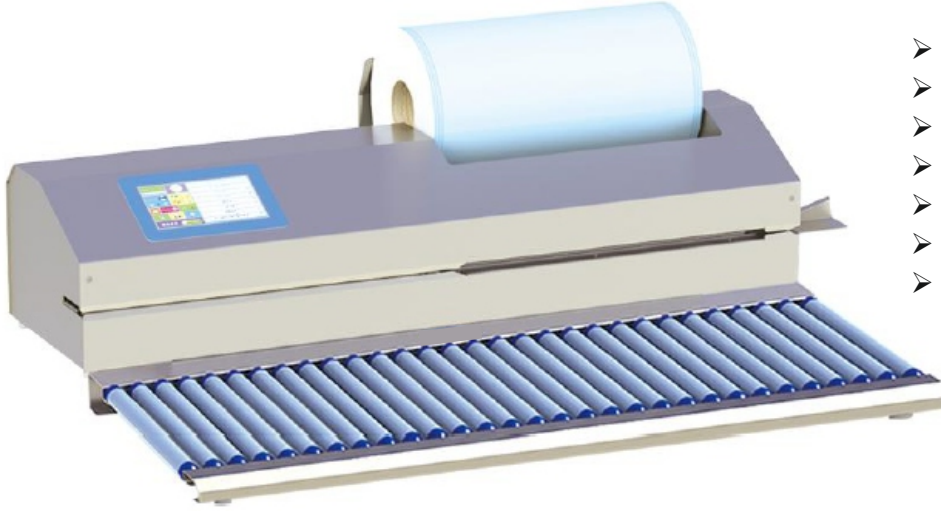

- Kapatma Geniřlięi: 12mm
- Kesme Geniřlięi: ≤ 400mm
- Kesme Uzunluęu: ≥ 50mm
- AC Güç Kaynaęı: 220V ±% 10 50Hz
- Güç: 600W
- Aęırlık: 34kg
- Genel Boyutlar: 962 × 280 × 230mm

**Ürün Kodu: AXCS-200**

### **Teknik Detaylar**

- Cihaz otomatik olarak kesme ve kapatma işlemini yapar.
- Birden fazla sterilizasyon rulosu yan yana yüklenebilmektedir.
- 7" dokunmatik LCD renkli ekranı mevcuttur. Android operasyon sistemi sayesinde grafiksel operasyon izleme, gerçek saat uygulamaları mümkündür.
- Hızlı ısıtma sistemi sayesinde 40 saniyede 180°C ye ulaşabilmektedir.
- %±1°C hassasiyet ile 60 ~ 220°C aralığında kapatma yapabilmektedir.
- Kapatma hızı 10 m/dk dır.
- Kapatma genişlięi 12 mm olup sterilizasyon rulolarındaki tipte bariyerli, çok kuvvetli yapıştırma yapmaktadır.
- 40 cm genişlięine kadar rulolar ile çalışmaya uygundur.
- En düşük kesme ve yapıştırma mesafesi: 50 mm dir.
- Kesme hızı 7,5 m/dk dır.
- 960×280×230 mm ölçülerinde, 34 kg aęırlıęındadır.

**KORDON**

Tıp Sağlık Araç ve Gereçleri

10006/1 No:43 A.O.S.B ÇİĞLİ İZMİR TÜRKİYE

<http://www.kordontip.com> - [info@kordontip.com](mailto:info@kordontip.com)

Tel:0232.348.60.60 / Fax:0232.348.60.90

